

ਐਂਟਰਾਲਾਈਟ ਇਨਫਿਨਟੀ ਪੰਪ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ

Tube Feeding by Enteralite Infinity Pump: Open System

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ To Start

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ/ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ; ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ Set Up

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
2. ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸਪਲਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਸਾਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ।
 - ਐਂਟਰਾਲਾਈਟ ਇਨਫਿਨਟੀ ਪੰਪ
 - ਫਾਰਮੂਲਾ
 - ਐਂਟਰਾਲਾਈਟ ਇਨਫਿਨਟੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ (ਟਿਊਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ)
 - 50 ਤੋਂ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਸਰਿੰਜ
 - ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ
 - ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਵੀ ਦਾ ਪੋਲ ਜਾਂ ਹੁੱਕ
3. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।




ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ Prepare the Feeding Set and Pump

1. ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ (ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ) ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਵਰਤੋ।
3. ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਟੇਨਰ ਦੀ ਟੌਪ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਗਿੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।
4. ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉ।

5. ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਪੋਲ 'ਤੇ ਟੰਗੋ, ਬੈਗ ਦਾ ਥੱਲਾ ਪੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ।
6. ਪੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪੰਪ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਦੇ ਵੀਲੂ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੋ।
7. ਪੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਐਨ/ਐੱਫ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ।
8. ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਹੋ।
9. ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ।
10. ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਪ ਦਾ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਰੇਟ/ਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦਬਾਉ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ "ਰੇਟ" ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ + ਜਾਂ - ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
11. ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਰੇਟ/ਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦਬਾਉ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ "ਡੋਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ + ਜਾਂ - ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Start Your Tube Feeding

1. ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਉ।
2. ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ।
 ਏ. ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ।
 ਬੀ. ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
 ਸੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਲੈੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਪਲੰਜਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉ।
 ਡੀ. ਕਲੈੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਉ।
3. ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਲਾਹੋ ਅਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਲੈੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
5. ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਡਿੰਗ (ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨ/ਪਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ।

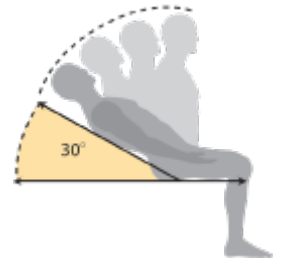

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ When Your Tube Feeding is Done

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
2. ਵੈਲੀਅਮ/ਟੇਟਲ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ/ਐੱਫ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਲੈੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
4. ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
5. ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ।
6. ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ

How to Clean and Store Your Tube Feeding Supplies

ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ Feeding Set

ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ (ਟਿਊਬਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਗ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਲੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ/ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਰਿੰਜਾਂ Syringes

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਿੰਜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਲੋ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਦਿਉ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਉ।

ਫਾਰਮੂਲਾ Formula

ਅਣਖੋਲ੍ਹੇ ਕਨਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਨਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿਉ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਨਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿਉ।

ਪੰਪ Pump

ਵਾਰਨਿੰਗ: ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਦਾ ਅਡਾਪਟਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਬਣ (ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਾਬਣ) ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਅਬਰੇਸਿਵ (ਰਗੜ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਟਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਵੀਲੂ ਦੇ ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੁੰਝ ਦਾ ਫਹਿਆ ਵਰਤੋ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰੇਟਰਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇਖੋ।

ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਪੰਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

For More Information on Using Your Feeding Pump

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:

<https://www.moogmedical.com/resources/video/#infinity>

ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਵਰਤੋ।





ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ <http://vch.eduhealth.ca> 'ਤੇ
ਜਾਉ ਜਾਂ pchem@vch.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦਾ ਨੰਬਰ **BB.210.H61.PU**
ਕਾਪੀਰਾਈਟ: ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਤੰਬਰ 2022

ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਿਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

www.vch.ca



ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂੰ
ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੰਧੀ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ।