

ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੂੰਡ ਥੈਰੇਪੀ Negative Pressure Wound Therapy ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 Prevena Plus 125 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ Patient Self-Care



ਤੁਹਾਡਾ 3M/KCI ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੂੰਡ ਥੈਰੇਪੀ (NPWT) ਸਿਸਟਮ ਫੇਮ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਟਿਊਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 ਵੈੱਕਯੂਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ:

☐ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ☐ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ☐ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ/ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (NP) ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ _____ / _____ .
ਤਾਰੀਖ ਸਮਾਂ

ਜੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ _____ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ/ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ (ਪੇਜ 3 ਵੇਖੋ), ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਬਲ-ਸੂਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਦਿਓਗੀ/ਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਵੀ। ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ/ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ/ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਣੀ ਹੈ (ਪੇਜ 5 ਵੇਖੋ)।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਵੇਖੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ Table of Content

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ	2
ਟ੍ਰਾਂਬਲ-ਸੂਟਿੰਗ (ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨੀ)	3
ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ	5
ਮਦਦ ਕਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ	5

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ Frequently Asked Questions

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

- ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਸਕਸ਼ਨ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸ਼ਨ ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ON ਰਹੇ।
- ਸਕਸ਼ਨ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਕੈਨਿਸਟਰ ਵਿਚ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਡਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਵਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ।
- ਜਾਮਨੀ ਡਰੇਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬੀਪ/ਲਾਈਟ' ਅਪ ਕਰੇਗੀ (ਪੇਜ 3 ਵੇਖੋ)।
- ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 3 ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ AA ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਇਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।



ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਰੇਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ?

ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 ਡਰੇਸਿੰਗ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ/ਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਡਰੇਸਿੰਗ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ:
 - ਡਰੇਸਿੰਗ ਛੂਹਣ ਵਿਚ ਸਖਤ ਹੈ।
 - ਟਿਊਬਿੰਗ ਵਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 - ਕੈਨਿਸਟਰ ¾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 - ON/OFF ਬਟਨ ਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
 - ਇਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰੋ।
- ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੈਕ ਕਰੋ।



ਕੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ?

- ਸਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਜਦੋਂ ਡਰੇਸਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ/ਟੱਬ ਬਾਥ ਲੈ ਸਕਦੀ/ਦਾ ਹਾਂ?

- ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਵਰ/ਟੱਬ ਬਾਥ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋੜਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੰਜ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।



ਮੇਰੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

- ਡਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਫਿਰ ਡਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ। ਡਰੇਸਿੰਗ ਹਟਾਓ।
- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਡਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਜਾਂ ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।

ਟ੍ਰਬਲ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ (ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨੀ) Trouble-Shooting

ਪ੍ਰੀਵੀਨਾ ਪਲੱਸ 125 ON ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਬੈਰੇਪੀ ਲਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।


- ਜਦੋਂ ਬੈਰੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੈਰੇਪੀ ਬੰਦ ਹੈ।
- ਹਰ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ।



4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ

ਅਲਾਰਮ



- ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਦੋ ਬੀਪ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬੀਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਅਲਰਟ ਮਿਊਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਓ।

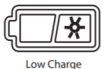ਅਲਾਰਮ Alarms	ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ What to Do
ਬੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ/ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ - ਜਦੋਂ ਬੈਰੇਪੀ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਬੈਰੇਪੀ ਲਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। - ਜਦੋਂ ਬੈਰੇਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ 8 ਬੀਪਾਂ ਦਏਗੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। 	ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਐਨ ਹੋਣਾ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬੈਰੇਪੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਨਰਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਅ ਬੈਟਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਠੋਸ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੀਪਾਂ ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 	ਅਲਾਰਮ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਬੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੱਗ ਕਰੋ।   
ਲੀਕ ਅਲਾਰਮ ਠੋਸ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੀਪਾਂ ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 	- ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਬਲ-ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਲਓ। - ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਡਰੇਪ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਿਊਬਿੰਗ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਸਿਆ ਹੈ। - ਬੈਰੇਪੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ON/OFF ਬਟਨ 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਦਬਾਓ/ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਏਆਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜੇਗਾ; ਲੀਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। - ਜੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਵੇਖੋ “ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ”

ਬਲਾਕੇਜ/ਕੈਨਿਸਟਰ ਪੂਰਾ ਅਲਾਰਮ ਠੋਸ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੀਪਾਂ ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 	• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਟਿਊਬਿੰਗ ਕਲੈਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਿੰਗ ਵਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। • ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ: ; ਥੈਰੇਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ON/OFF ਬਟਨ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ/ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ; ਟਿਊਬਿੰਗ ਕਲੈਪ ਕੈਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਲੈਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੈਨਿਸਟਰ ਦੀ ਟਿਊਬਿੰਗ ਪੇਰਟਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਬਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ। ; ਜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੈਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢੋ। ; ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਾਕਿੰਗ ਟੈਬ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ। ; ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ (ਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ); ਲਾਕਿੰਗ ਟੈਬ ਕਲਿਕ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ; ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਓ, ਜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ; 30+ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੇਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 30+ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ; ਡਰੇਸਿੰਗ ਟਿਊਬਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪੇਰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ। ; ਥੈਰੇਪੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ON/OFF ਬਟਨ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ/ਹੋਲਡ ਕਰੋ।
ਸਿਸਟਮ ਡਿਫੋਲਟ ਅਲਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੀਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।	• ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ON/OFF ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਦਬਾਓ/ਹੋਲਡ ਕਰੋ। • 3 AA ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। • ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪੇਜ 6 ਵੇਖੋ “ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ”.
3M/KCI ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ Customer Service 1-800-668-5403	

ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ... Nothing is Working...

1. ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ/ NP ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ((ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸਿਜ਼ ਛੱਡੋ)।
2. ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ:
 - ; ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਬਲ-ਸੂਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ (ਕੈਚੀ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਪ) ਲੱਭੋ।
 - ; ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ OFF ਹੈ; 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ON/OFF ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ/ਹੋਲਡ ਕਰੋ।
 - ; ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
 - ; ਜਾਮਨੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕੱਟੋ (ਚਿੱਤਰ A ਵੇਖੋ)।
 - ; ਕੱਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੋ; ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੇਪ ਲਾਓ (ਚਿੱਤਰ B ਵੇਖੋ)
 - ; ਡਰੈਸਿੰਗ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲੋ।
 - ; ਕੈਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
 - ; ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।

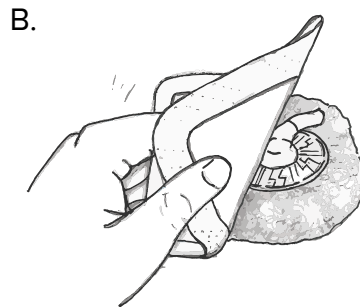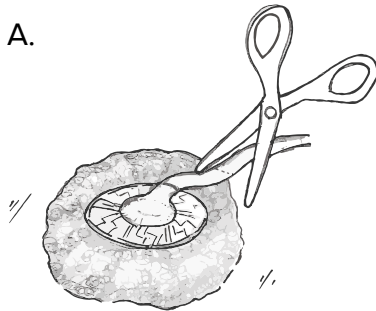

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ When to Seek Help

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ/ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

- ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਰਦ।
- 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ।
- ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣੀ)।
- ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਗਰਮੀ, ਕੋਮਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਜ਼।
- ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾੜੀ/ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ।
- ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਵਿਚ ਡਰੇਨੇਜ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ OFF ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ (911) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਟਿਊਬ, ਜਾਂ ਕੈਨਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ:

- ਬਲੱਡ (ਲਾਲ); ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ।
- ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਲਈ ਬਾਈਲ (ਹਰਾ)।
- ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਲਈ ਟੱਟੀ (ਭੂਰੀ)

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਰਡਰਲੇਕਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ/ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ (911) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਫੁੰਡ ਕਮੇਟੀ

ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ, 'ਤੇ ਐਨਲਾਈਨ ਜਾਓ <http://vch.eduhealth.ca>
ਜਾਂ ਈਮੇਲ phem@vch.ca ਅਤੇ ਕੋਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ **FO.160.N44.PU**
© Vancouver Coastal Health, ਮਈ 2023

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਸੀ।
www.vch.ca



ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ
QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ
ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੰਧੀ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰੋ।